


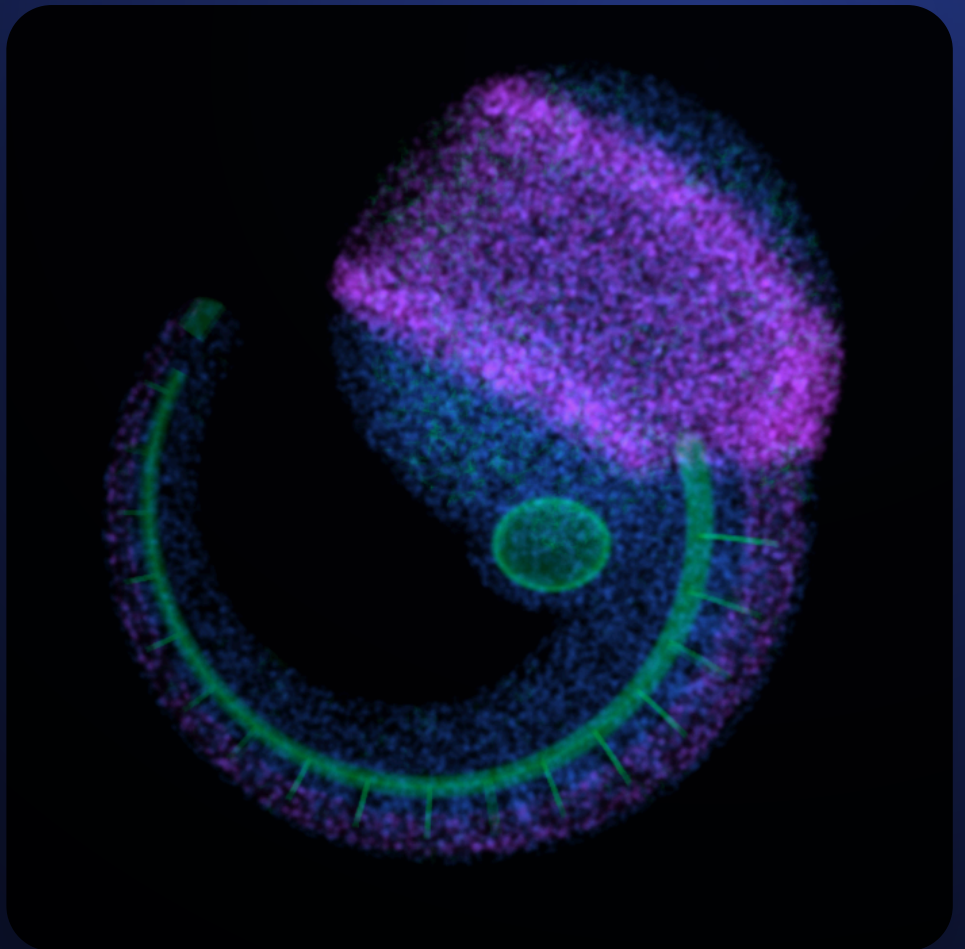

IRIBHM · ULB — LUMEN3D

Lumen3D — l'essentiel

Ce que devient votre fichier Imaris, du microscope à l'écran — et comment bien s'en servir

Le guide du biologiste : préparer son acquisition, la faire traiter, la mettre en ligne, l'explorer en 3D, mesurer, faire des figures, et savoir interpréter ce que l'on voit. Chaque section renvoie au chapitre de la documentation complète (« Lumen3D, de A à Z ») qui donne tous les détails.

Sommaire


1. Lumen3D en deux pages	
1.1 Pourquoi une préparation est indispensable	
1.2 Trois types de jeux de données	
2. Avant le pipeline : préparer son acquisition	
2.1 Le nom du fichier : stade et embryon	
2.2 Ce qu'Imaris doit contenir	
2.3 Couleurs, canaux, données 8 ou 16 bits	
2.4 Timelapse avec suivi cellulaire	
3. Lancer le pipeline	
4. Le nettoyage de l'image	
4.1 Les cinq repères, en une phrase chacun	
4.2 Un exemple complet, voxel par voxel	
4.3 Sur une vraie coupe	
4.4 La limite à connaître : la taille minimale	
4.5 Pour un timelapse : une fenêtre commune	
5. Réduire la taille sans perte	
5.1 La pyramide	
5.2 Compression sans perte	
5.3 Les briques vides ne sont pas stockées	
6. Les briques et les formats	
7. La fin du pipeline	
8. Mettre en ligne et régler le dataset	
8.1 Les réglages qui comptent pour vous	
9. Explorer en 3D	
9.1 Qualité et chargement	
9.2 Comment l'image est calculée	
9.3 Les trois modes de rendu	
10. Régler l'affichage d'un canal	
11. Mesurer et explorer l'intérieur	
12. Faire des figures et exporter	
13. Timelapses et suivi cellulaire	
14. Les photographies 2D	
15. Interpréter correctement ce que l'on voit	
15.1 Ce que la plateforme ne fait pas	
16. Que se passe-t-il si... ?	
17. Les mots à connaître	

1. Lumen3D en deux pages

⌚ EN 30 SECONDES

- Lumen3D affiche des volumes confocaux de **plusieurs gigaoctets** dans un simple navigateur, sans rien installer.
- Un **pipeline** prépare chaque fichier Imaris **une seule fois** ; le fichier d'origine n'est jamais modifié.
- Le **viewer** ne télécharge que ce dont l'écran a besoin, puis calcule l'image 3D sur la carte graphique.

Le voyage d'une acquisition : du microscope à l'écran

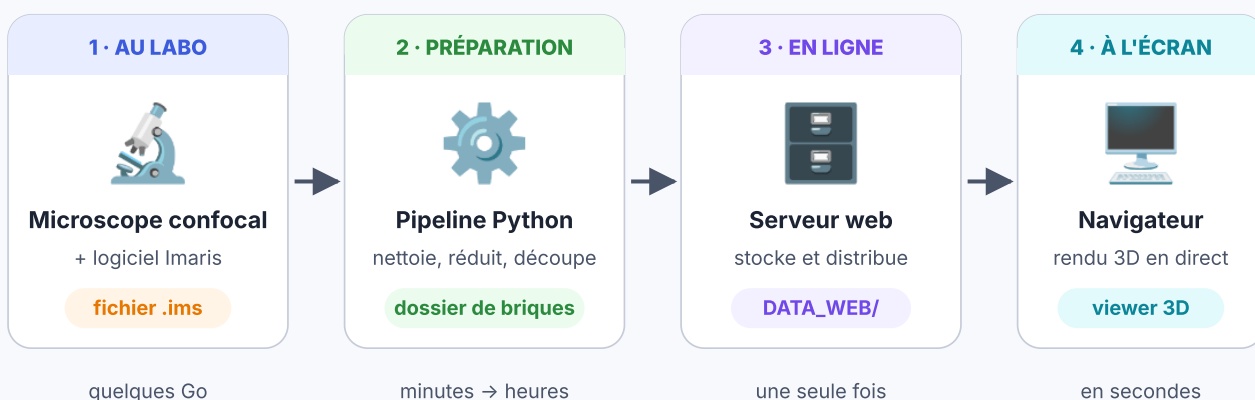


Le fichier d'origine n'est jamais modifié : le pipeline en fabrique une copie optimisée pour le web.

▲ Du microscope à l'écran, en quatre étapes.

1.1 Pourquoi une préparation est indispensable

Pourquoi un navigateur ne peut pas « simplement ouvrir » la pile

Exemple réel : embryon 3789 × 3789 × 178 voxels, 4 canaux (jeu de référence du pipeline)

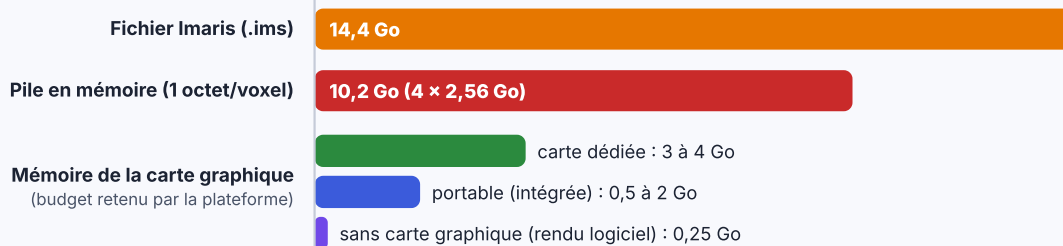


Conclusion : il faut découper, réduire et ne charger que ce que l'écran montre.

À ~5 Mo/s (débit mesuré sur un hébergeur), télécharger 10 Go d'un coup prendrait plus d'une demi-heure.

▲ Même réduit à 1 octet par voxel, un gros embryon dépasse la mémoire d'un ordinateur courant : il faut le découper et n'en charger que la partie utile.

1.2 Trois types de jeux de données

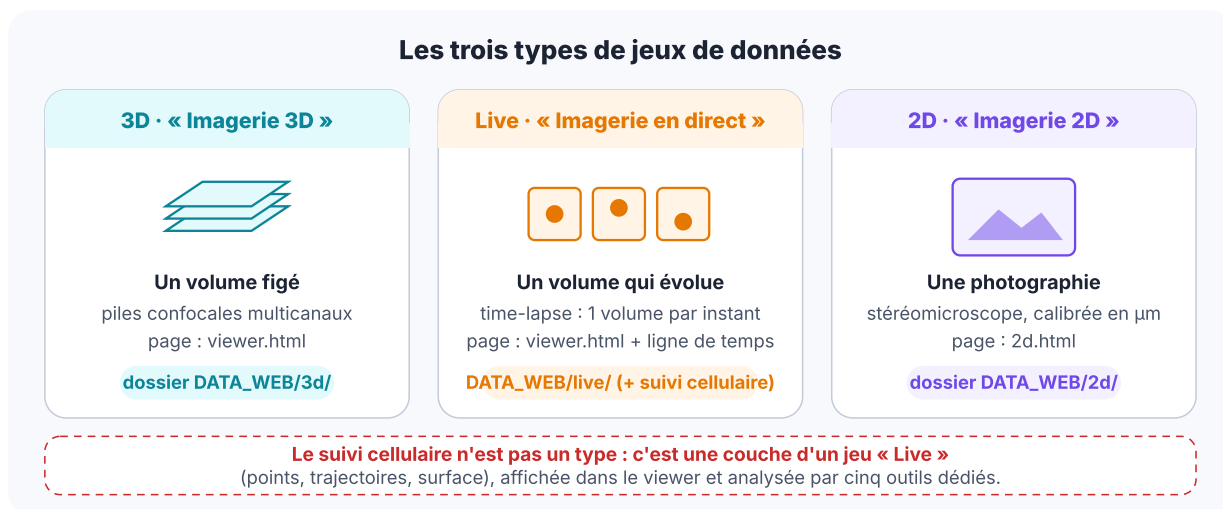

▲ Trois types, trois pages d'affichage. Les noms affichés (3D, 2D, Live) peuvent être renommés par l'administrateur.

TYPE	CE QUE C'EST	PAGE	PARTICULARITÉ
3D	une pile confocale, jusqu'à 4 canaux affichés	viewer 3D	outils de mesure, coupes, Studio
Live	une série temporelle (timelapse)	viewer 3D + frise	peut porter un suivi cellulaire
2D	une photographie calibrée (stéréomicroscope)	page 2D	isolation de la coloration X-gal

i À SAVOIR

Ce document est le résumé de la **documentation complète** (« Lumen3D, de A à Z », 21 chapitres). Les renvois → **ch. N** pointent vers le chapitre qui explique tout en détail. Les images de volumes proviennent d'**embryons de démonstration synthétiques**, traités par le vrai pipeline.

2. Avant le pipeline : préparer son acquisition

🕒 EN 30 SECONDES

- Le **nom du fichier** donne le stade et le numéro d'embryon : choisissez-le bien.
- La **calibration** (taille du voxel) et le **nom des canaux** sont lus dans le fichier Imaris : vérifiez-les avant d'exporter.
- Pour un timelapse suivi, préparez la **source du suivi** (un des trois formats acceptés).

2.1 Le nom du fichier : stade et embryon

Le pipeline lit le stade (**E...**) et l'embryon (**Em...**) dans le nom. Les règles exactes :

DANS LE NOM	STADE LU	EMBRYON LU
...-E8.5-Em1-... ou ...-E8,5-...	E8.5	Em1
...-E8-5-... (tiret : 25, 5 ou 75 seulement)	E8.5	—
...-E85-... · ...-E105-... · ...-E95-... (forme compacte)	E8.5 · E10.5 · E9.5	—
...-E8-1-DAPI... (le « 1 » n'est pas une fraction)	E8	Em1
...-E95-2-...	E9.5	Em2
aucun E... reconnu	« Unknown »	—

Le nom du dossier publié est le nom du fichier, nettoyé (caractères autres que lettres, chiffres, **.**, **,**, **_**, **-** remplacés par **-**). Tout cela se corrige ensuite dans l'administration. → ch. 8

2.2 Ce qu'Imaris doit contenir

Vérifiez dans Imaris avant l'export :

- **la calibration** (taille du voxel en X, Y, Z) : sans elle, pas de barre d'échelle ni de mesure en μm ;
- **le nom de chaque canal** (DAPI, Pecam1...) : un nom vide devient « Channel 1 », « Channel 2 »... ;
- pour un timelapse, **les heures** de chaque instant : l'intervalle retenu est la médiane des écarts.



▲ La taille du voxel est calculée : étendue ÷ nombre de voxels, axe par axe. Ici $921,6 \mu\text{m} \div 768 = 1,2 \mu\text{m}$.

1-2-4 MICRO-EXEMPLE


Le pipeline lit l'**étendue physique** (ExtMin → ExtMax) et la divise par le nombre de voxels. $921,6 \mu\text{m}$ sur 768 voxels → **1,2 μm** par voxel en X. $336 \mu\text{m}$ sur 112 coupes → **3,0 μm** en Z. Les unités nm et mm sont converties en μm . Une calibration absente n'est **jamais inventée**.

2.3 Couleurs, canaux, données 8 ou 16 bits

- Les **couleurs** d'Imaris ne sont pas reprises : chaque canal reçoit une couleur par défaut (vert, bleu ciel, magenta, rouge...), que l'administrateur change ensuite.
- Fichiers **8 ou 16 bits** : les deux sont acceptés. L'image publiée est toujours en 8 bits (§ 4).
- Plus de **4 canaux** : tous sont traités, mais le viewer n'en affiche que les 4 premiers.

2.4 Timelapse avec suivi cellulaire

Le pipeline cherche le suivi automatiquement, **dans cet ordre** :

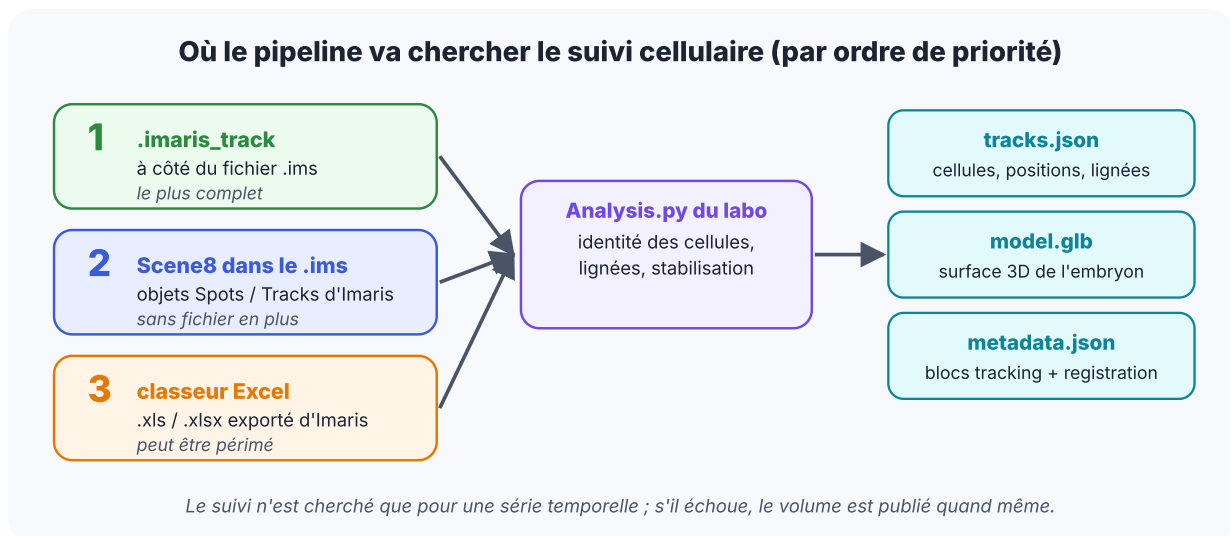

▲ Les trois sources possibles, de la plus complète à la plus fragile.

⚠ ATTENTION

Le classeur Excel exporté d'Imaris peut être **périmé** (mesuré sur un jeu du laboratoire : 155 des 172 spots). Son nom doit contenir l'intervalle entre deux images (par ex. **30min**) : l'analyse le lit dans le nom. Préférez les objets *Spots/Tracks* enregistrés dans le **.ims** lui-même.

3. Lancer le pipeline

🕒 EN 30 SECONDES

- Tout se lance avec **RUN.bat**, sur un PC Windows, depuis le **pack Pipeline** téléchargé dans l'onglet *Pipeline* de l'administration.
- Les **.ims** vont dans **input**, le résultat sort dans **output**.
- Le dataset est construit à part et n'apparaît qu'une fois **entièrement** terminé.

De votre ordinateur au site : deux routes



Dans les deux cas, le jeu de données apparaît dans le catalogue sans rien régénérer.

▲ De votre ordinateur au site : déposer, lancer, puis copier ou glisser.

CHOIX DU MENU RUN.BAT	CE QUE CELA FAIT
[1]	Traiter des volumes Imaris (<code>.ims</code> → <code>output\</code> , suivi cellulaire inclus)
[2]	Analyse de tracking Imaris (Excel → <code>tracking\OUTPUT\</code>)
[3]	Importer des photographies 2D (<code>.tif</code> → <code>output\2d\</code>)
[4]	Attacher un suivi à un dataset déjà traité
[5]	Vérifier l'environnement seulement


👉 ASTUCE

Deux éditions du pack : **légère** (~3 Mo, télécharge Python au premier lancement) et **complète hors-ligne** (~70 Mo, tout est embarqué). Les versions des bibliothèques sont figées : deux ordinateurs produisent les **mêmes octets** à partir du même `.ims` . Retraiter un dataset déjà publié **conserve** vos réglages (nom, couleurs, orientation, vue par défaut, galerie, visibilité). → ch. 8

4. Le nettoyage de l'image

🕒 EN 30 SECONDES

- Le pipeline pose **une seule question** à chaque voxel : *fait-il partie de l'embryon ?*
- Oui** → sa valeur n'est **pas modifiée**. **Non** → il est remplacé par la **médiane** de ses voisins, ce qui le ramène presque toujours à **0**.
- Puis tout passe en **8 bits** par une simple règle de trois : le fond devient exactement **0**.

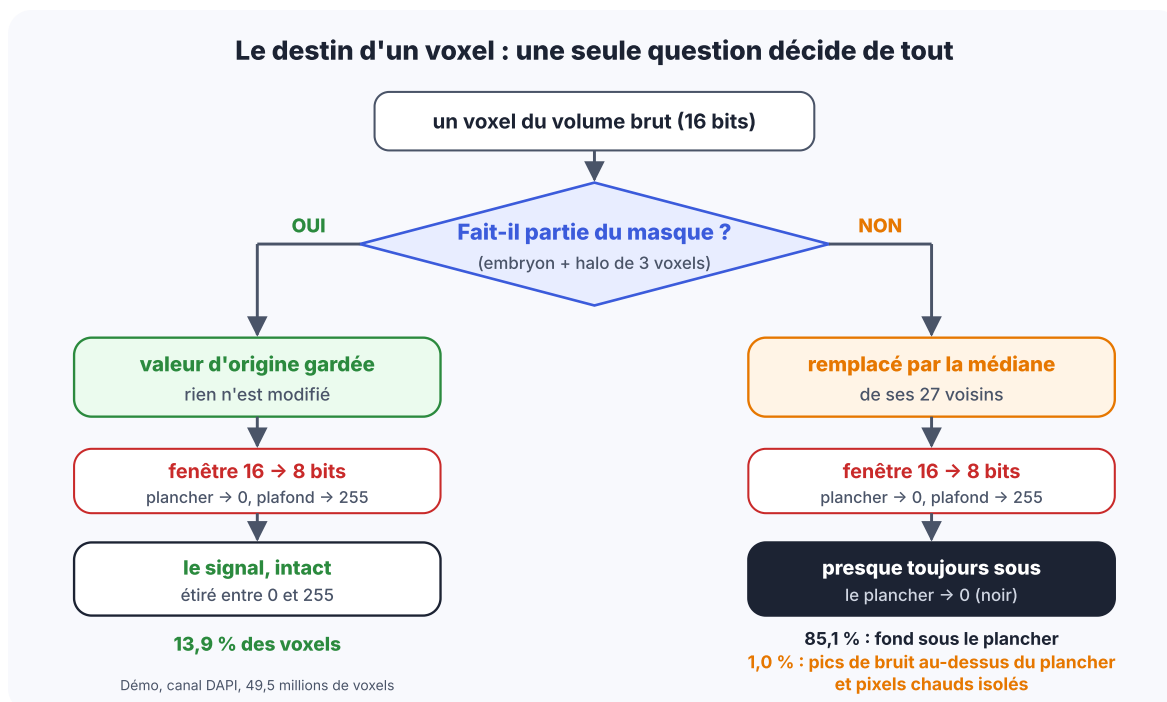

▲ Le destin d'un voxel. Pourcentages mesurés sur tout le volume du jeu de démonstration (canal DAPI).

4.1 Les cinq repères, en une phrase chacun

	QUESTION	RÉPONSE DU PIPELINE
Plancher	À partir d'où est-ce du signal ?	la valeur sous laquelle se trouvent 99 % des voxels des 8 coins du volume (là où il n'y a pas d'embryon)
Plafond	Où mettre le blanc ?	la valeur sous laquelle se trouvent 99,9 % des voxels (1 sur 4 dans chaque direction est examiné)
Masque	Où est l'embryon ?	les voxels au-dessus de 1,1 × plancher, sans les points isolés , plus un halo de 3 voxels
Médiane	Que faire du reste ?	chaque voxel hors masque prend la valeur du milieu de ses 27 voisins (cube 3 × 3 × 3)
Fenêtre	Comment passer en 8 bits ?	plancher → 0 , plafond → 255 , une ligne droite entre les deux


1 2 4 MICRO-EXEMPLE

Sur le canal DAPI du jeu de démonstration : plancher = **4 524**, plafond = **33 663**. Un voxel brut de **20 000** devient $255 \times (20\,000 - 4\,524) \div (33\,663 - 4\,524) = \mathbf{135}$ (partie décimale tronquée). Un voxel à 4 000 devient **0** ; un voxel à 40 000 devient **255**.

4.2 Un exemple complet, voxel par voxel

Le nettoyage voxel par voxel, sur une ligne de 19 voxels

① Valeurs brutes (16 bits). Plancher = 4 524, seuil = $1,1 \times \text{plancher} = 4\,976$, plafond = 33 663

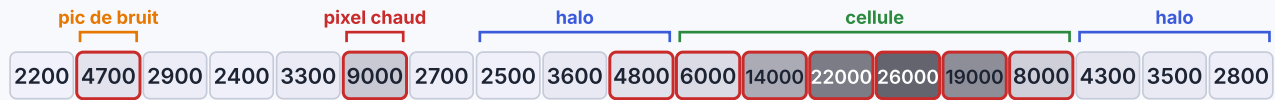

② Seuil : au-dessus de 4 976 ?




③ Ouverture : les points isolés sont retirés



④ Dilatation $\times 3$: le masque s'élargit de 3 voxels de chaque côté (halo)



⑤ Hors du masque : médiane de 3 voxels (ici en 1D ; 27 en 3D)

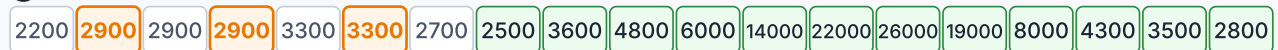

⑥ Fenêtre → résultat 8 bits (0 à 255)



Pour comparer : la fenêtre seule, sans masque ni médiane



Exemple en 1D pour la lisibilité, calculé avec les mêmes fonctions (scipy) ; le pipeline fait exactement cela en 3D.

▲ 19 voxels alignés, avec les vrais repères du jeu de démonstration. En une dimension pour pouvoir lire chaque nombre ; le pipeline fait la même chose en 3D.

- 1 **Seuil** : seuls la cellule et le pixel chaud (9 000) dépassent 4 976. Le pic de bruit (4 700) ne passe pas.
- 2 **Ouverture** : le pixel chaud est **seul**, il est retiré. La cellule, assez large, reste.
- 3 **Halo** : le masque s'élargit de 3 voxels autour de la cellule ; son bord faible (4 800) est protégé.
- 4 **Médiane** hors du masque : le pic de bruit 4 700 → 2 900, le pixel chaud 9 000 → 3 300.
- 5 **Fenêtre** : tout ce qui est sous le plancher → 0. La cellule va de 12 à 187, son bord faible donne 2.

Dernière ligne de la figure : **sans masque ni médiane**, le pic de bruit et le pixel chaud resteraient visibles (1 et 39). Sur le volume entier, masque + médiane éliminent **97 %** de ces points parasites (341 674 → 10 069). → ch. 5

4.3 Sur une vraie coupe




■ fond sous le plancher → 0 ■ hors masque, survit à la médiane (structure faible étendue)
■ au-dessus du plancher mais hors masque → écrasé par la médiane → 0 ■ dans le masque → valeur d'origine gardée

Coupe z = 56, canal DAPI, zone de 160 × 110 voxels où le tissu est faible (jeu de démonstration).

▲ À gauche le brut, au milieu ce que devient chaque voxel, à droite le résultat, dans une zone où le tissu est faible. Vert : gardé tel quel. Orange : écrasé par la médiane. Rouge (rare) : zone faible mais étendue, qui survit.

4.4 La limite à connaître : la taille minimale

Taille minimale : environ 3 voxels d'épaisseur dans chaque direction

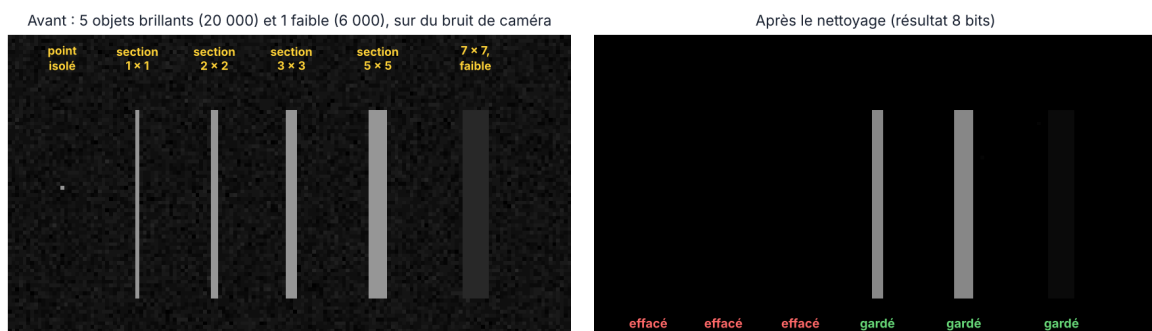


Volume synthétique de test, coupe du milieu : chaque barre a une section carrée (même épaisseur en X et en Z). Même plancher et même plafond que le canal DAPI de démonstration.

▲ Barres de section carrée, brillantes (20 000) ou faibles (6 000). Les sections 1 × 1 et 2 × 2 sont effacées ; à partir de 3 × 3, l'objet est gardé, même faible.

⚠ ATTENTION

Un objet plus fin qu'environ 3 voxels dans une direction est effacé, même très brillant (un point, un fil, une feuille d'un voxel d'épaisseur). Avec des voxels de $1,2 \times 1,2 \times 3 \mu\text{m}$, cela fait **3,6 μm en X et Y, 9 μm en Z** : un objet présent sur une ou deux coupes seulement peut disparaître. Calculez avec **vos** tailles de voxel ; en cas de doute, comparez avec le [.ims](#) d'origine. Un objet fin **collé** (à moins de 3 voxels) à un objet plus épais est protégé par le halo. → ch. 5

4.5 Pour un timelapse : une fenêtre commune

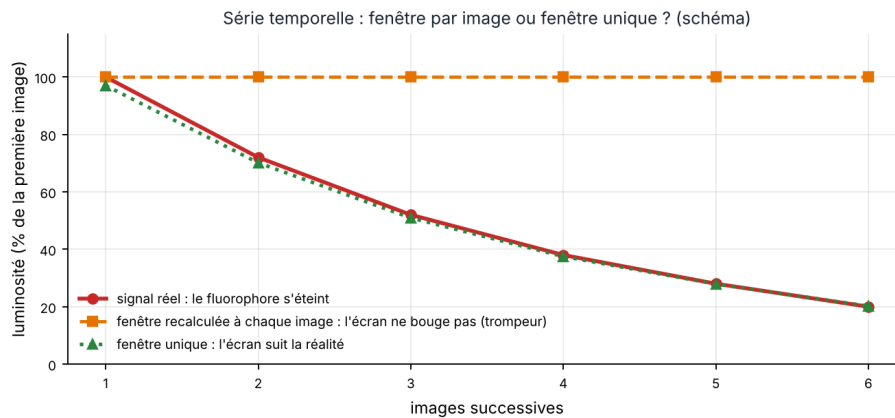

▲ Avec une fenêtre par image, une série qui s'éteint semblerait garder la même intensité. Lumen3D utilise une seule fenêtre pour toute la série (schéma, chiffres illustratifs).

Le plancher et le plafond sont calculés sur **jusqu'à 8 instants** répartis dans la série. Le niveau de signal de chaque instant est **enregistré** dans `metadata.json`, mais aucun réglage du viewer ne l'utilise encore : une série qui s'éteint s'affiche réellement plus sombre.

? POURQUOI CE CHOIX ?

Une méthode de seuillage automatique (Otsu) et un débruitage par réseau de neurones (Noise2Void) ont été essayés puis **retirés** en version 0.12.0 : ils créaient des « taches » colorées artificielles. → ch. 5


5. Réduire la taille sans perte

🕒 EN 30 SECONDES

- **8 bits** au lieu de 16 : deux fois moins d'octets.
- Une **pyramide** de versions de plus en plus petites permet d'afficher vite, puis de préciser.
- Le volume est coupé en **briques** de 64^3 voxels compressées **sans perte** ; les briques vides ne sont **pas stockées**.

5.1 La pyramide


La pyramide de résolutions : même coupe projetée (MIP), niveaux 0 à 3

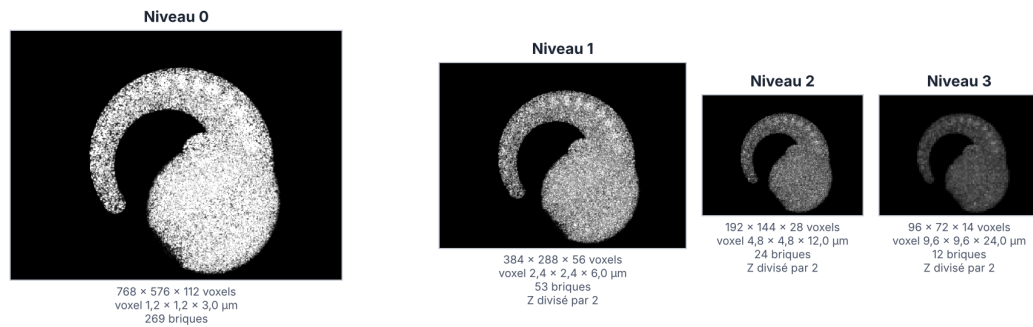

▲ Les quatre niveaux du jeu de démonstration, à l'échelle. Chaque niveau est la moyenne de blocs 2×2 ($\times 2$ en Z quand les voxels sont assez fins en Z) du niveau du dessous.

- X et Y sont divisés par 2 à chaque niveau ; **Z seulement tant que** le voxel en Z ne devient pas plus de 1,5 fois plus grand qu'en XY.
- La moyenne est **entière, arrondie au plus proche**. On s'arrête quand le plus grand côté fait 128 voxels ou moins.
- Le niveau 0 est l'image nettoyée telle quelle, **jamais rééchantillonnée**. → ch. 6

5.2 Compression sans perte

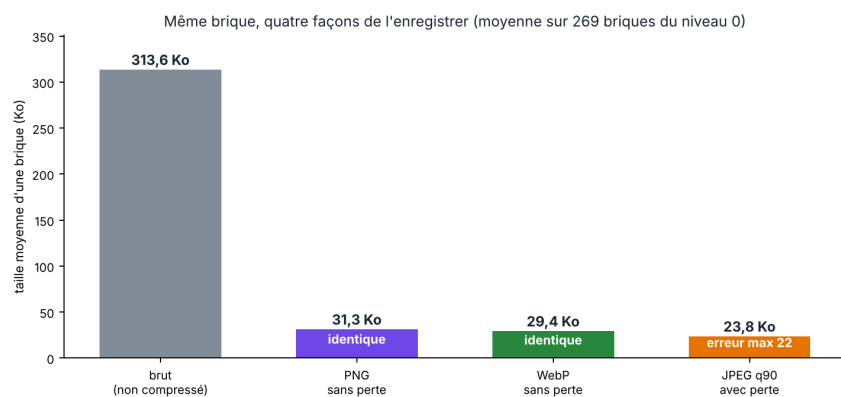


▲ Taille moyenne d'une brique du jeu de démonstration. Seul le JPEG est plus petit... mais il modifie les valeurs.

FORMAT	TAILLE MOYENNE	VALEURS EXACTES ?
Brut	313,6 Ko	oui
PNG (meilleure compression)	31,3 Ko	oui
WebP sans perte (choisi)	29,4 Ko	oui
JPEG qualité 90	23,8 Ko	non : jusqu'à 22 niveaux d'écart, 11,7 % des voxels modifiés

? POURQUOI CE CHOIX ?

Ce sont des **mesures** : une compression avec perte inventerait du signal (2,2 % des voxels à 0 deviennent non nuls en JPEG). Le WebP est un peu plus compact que le PNG et le navigateur le décode très vite. → ch. 6

5.3 Les briques vides ne sont pas stockées

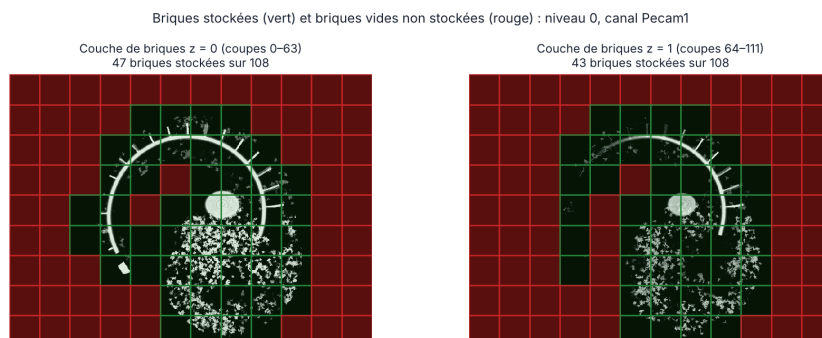

▲ Vert : brique stockée. Rouge : brique dont tous les voxels valent 0, non stockée. Jeu de démonstration, niveau 0.

Une brique n'est stockée que si **au moins un voxel** de son intérieur vaut 1 ou plus. Sur le jeu de démonstration : **358 briques stockées sur 777** possibles.

Le jeu de démonstration : de 297 Mo de voxels à 9 Mo de briques

Voxels bruts en 16 bits (3 canaux)		297,3 Mo
Après passage en 8 bits		148,6 Mo
Briques WebP, 4 niveaux de pyramide		9,3 Mo
+ plans et projections (Studio)		9,1 Mo


Gros gain : le fond devient exactement 0, les briques vides ne sont pas stockées et le reste se compresse sans perte.

▲ Du fichier d'origine au dossier publié : 297 Mo de voxels bruts deviennent 9 Mo de briques (jeu de démonstration).


6. Les briques et les formats

🕒 EN 30 SECONDES

- Une brique = **64³ voxels** utiles + une **bordure d'un voxel**, rangée à plat dans **une image** WebP.
- Les briques sont regroupées en **paquets** ; un petit **index** dit où trouver chacune.
- Des **plans** XY et des **projections par couche** accélèrent les figures du Studio.

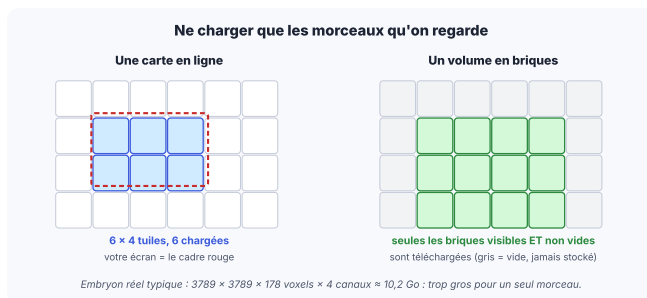

▲ Comme les tuiles d'une carte en ligne : seules les briques visibles et non vides sont téléchargées.

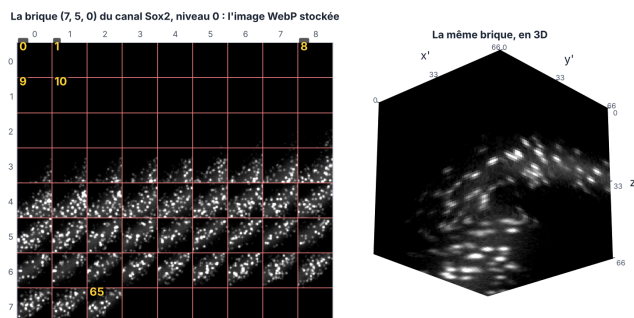

▲ Une vraie brique du jeu de démonstration : ses 66 coupes rangées en 9 × 8 dans une seule image.


- **La bordure** copie le voxel voisin : l'image peut être lissée sans couture visible entre deux briques. → ch. 7
- **Les plans** ([planes/](#)) : une coupe XY à pleine résolution lit **94 Ko au lieu de 5 078 Ko** sur le jeu de démonstration.
- **Les formats** : un dataset porte un numéro de format (1 à 4, le plus récent est 4). Le pipeline 0.21.0 écrit directement le format 4. Un ancien dataset se met à jour depuis l'onglet *Mises à jour des données*, sans retraitement. → ch. 17

7. La fin du pipeline


🕒 EN 30 SECONDES

- Le pipeline écrit une **fiche** ([metadata.json](#)), une **vignette**, les **histogrammes** des canaux.
- Il attache le **suivi cellulaire** d'un timelapse et **stabilise** les positions.
- Il publie **tout ou rien** : jamais de dataset à moitié copié.

FICHIER PUBLIÉ	RÔLE
metadata.json	la fiche : nom, stade, dimensions, calibration, canaux, format
thumbnail.webp	la vignette de l'explorateur (projection maximale en fausses couleurs)
bricks/	les briques de tous les niveaux et leur index
planes/ , mips/	plans XY et projections par couche de 64 plans
tracks.json , model.glb	suivi cellulaire et surface de l'embryon (timelapses)
download/	(option) le .ims d'origine, un TIFF ImageJ, des projections PNG, un README

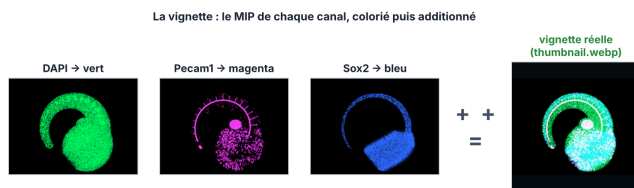

▲ La vignette : trois projections maximales coloriées et additionnées.

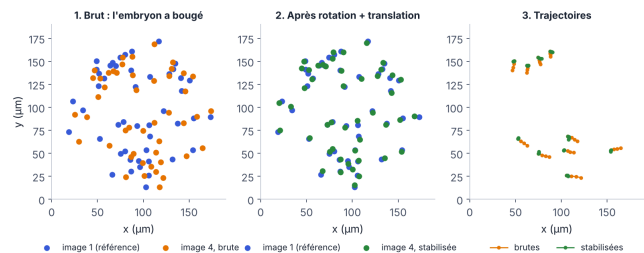

▲ La stabilisation : une rotation + translation (sans déformation) superpose les cellules de deux instants.


i À SAVOIR

Stabilisation. L'embryon bouge pendant l'acquisition. Pour chaque instant, le pipeline calcule le déplacement **rigide** qui superpose au mieux les cellules (méthode de Kabsch, au moins 3 cellules de référence). Le viewer applique ce déplacement **au regard**, pas aux voxels : aucun voxel n'est rééchantillonné. → ch. 8 et 13

8. Mettre en ligne et régler le dataset

🕒 EN 30 SECONDES

- Deux voies : **copier** le dossier dans [DATA_WEB/](#) du serveur, ou le **glisser** dans l'onglet *Import* de l'administration.
- Un dataset importé est **masqué** jusqu'à ce que vous l'affichiez.
- L'administration règle le nom, le stade, les couleurs, la calibration, l'**orientation** et la **vue par défaut**.

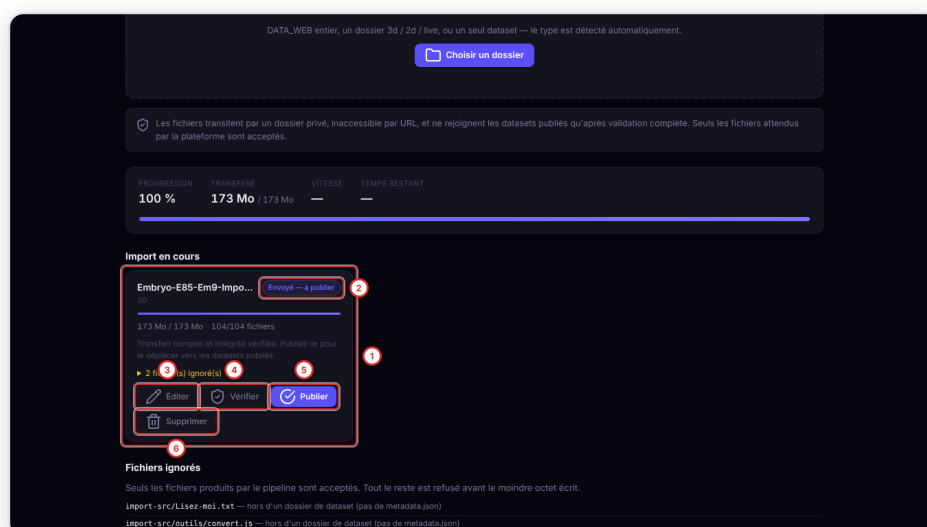


▲ L'onglet Import : un dataset entièrement transféré et vérifié, prêt à publier (boutons Éditer, Vérifier, Publier, Supprimer).

- Le transfert **reprend tout seul** après une coupure : il suffit de reglisser le même dossier (pendant 7 jours).

- L'ordre d'envoi est pensé pour vous : la fiche, la vignette et le **niveau le plus grossier** partent en premier, si bien que le dataset est **réglable en quelques minutes**, pendant que le reste arrive.
- Seuls les fichiers produits par le pipeline sont acceptés. → Guide de l'administrateur, ch. 4

8.1 Les réglages qui comptent pour vous

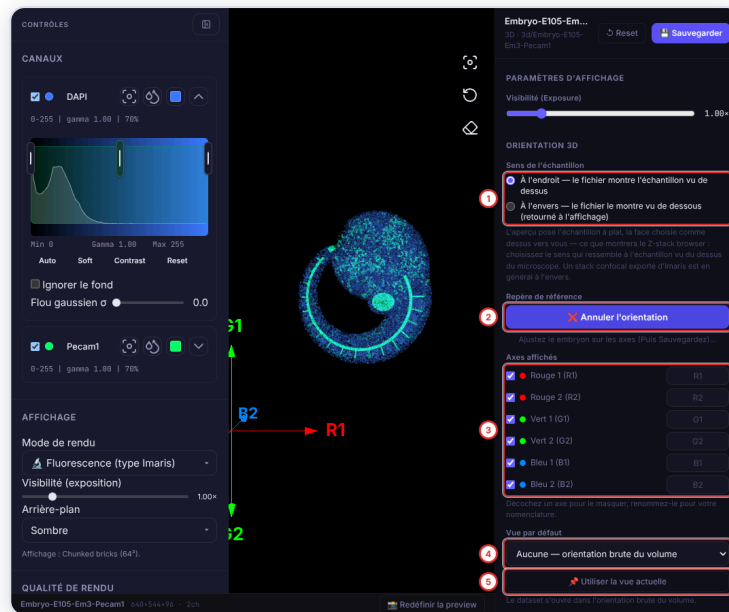

▲ L'orientation dans l'administration : sens de l'échantillon, repère des axes, axes affichés, vue par défaut.

RÉGLAGE	À QUOI IL SERT
Nom, stade, embryon, description	ce que lisent les visiteurs dans l'explorateur
Couleurs des canaux	la couleur par défaut de chaque canal à l'ouverture
Calibration	corriger une taille de voxel absente ou fausse
Sens de l'échantillon	« À l'envers » pour une pile vue de dessous (cas fréquent d'un export Imaris) : le navigateur Z-stack montrera la bonne face
Définir l'orientation	aligner les axes rouge / vert / bleu sur l'anatomie, puis les renommer (antérieur, dorsal...)
Vue par défaut	la pose dans laquelle le dataset s'ouvre
Galerie	joindre des figures annotées, visibles dans le viewer
Visibilité	afficher ou masquer le dataset dans l'explorateur public

9. Explorer en 3D

🕒 EN 30 SECONDES

• Ouvrez un dataset depuis l’**explorateur** (recherche, filtres par type et par stade).

• Le viewer affiche d’abord une **image grossière**, puis le détail arrive **en partant du centre**.

• Trois **modes de rendu** pour trois questions différentes.

▲ Le viewer : barre d’outils en haut, canaux à gauche, le volume au centre (jeu de démonstration).

9.1 Qualité et chargement

niveau 0

niveau 1

niveau 2

niveau 3

768 × 576 × 112 voxels
voxel 1,2×1,2×3,0 µm · 269 briques

384 × 288 × 56
voxel 2,4×2,4×6,0 µm · 53 briques

192 × 144 × 28
voxel 4,8×4,8×12 µm · 24 briques

96 × 72 × 14
voxel 9,6×9,6×24 µm · 12 briques

Qualité → niveau

512 : max(X, Y) ≤ 768
→ **niveau 0 (768 ≤ 768)**

1024 : max(X, Y) ≤ 1536
→ **niveau 0**

Natif : toujours le niveau 0
→ **niveau 0**

les trois coïncident ici

Chaque niveau a 4 fois moins de voxels en X × Y que le précédent (et la moitié en Z).

▲ La pyramide réelle du jeu de démonstration et la règle des trois qualités.

QUALITÉ	NIVEAU CHARGÉ
512 (par défaut)	le niveau le plus fin dont le grand côté XY ne dépasse pas 768 px
1024	le niveau le plus fin dont le grand côté ne dépasse pas 1 536 px


Lumen3D — L’essentiel pour le biologiste

17 / 29

QUALITÉ	NIVEAU CHARGÉ
Natif	le niveau 0, pleine résolution

Si la carte graphique n'a pas assez de mémoire, le viewer prend **le niveau suivant plus léger** et le dit dans un message. Une ligne de progression indique la qualité, le pourcentage et l'étape en cours. → ch. 10


9.2 Comment l'image est calculée

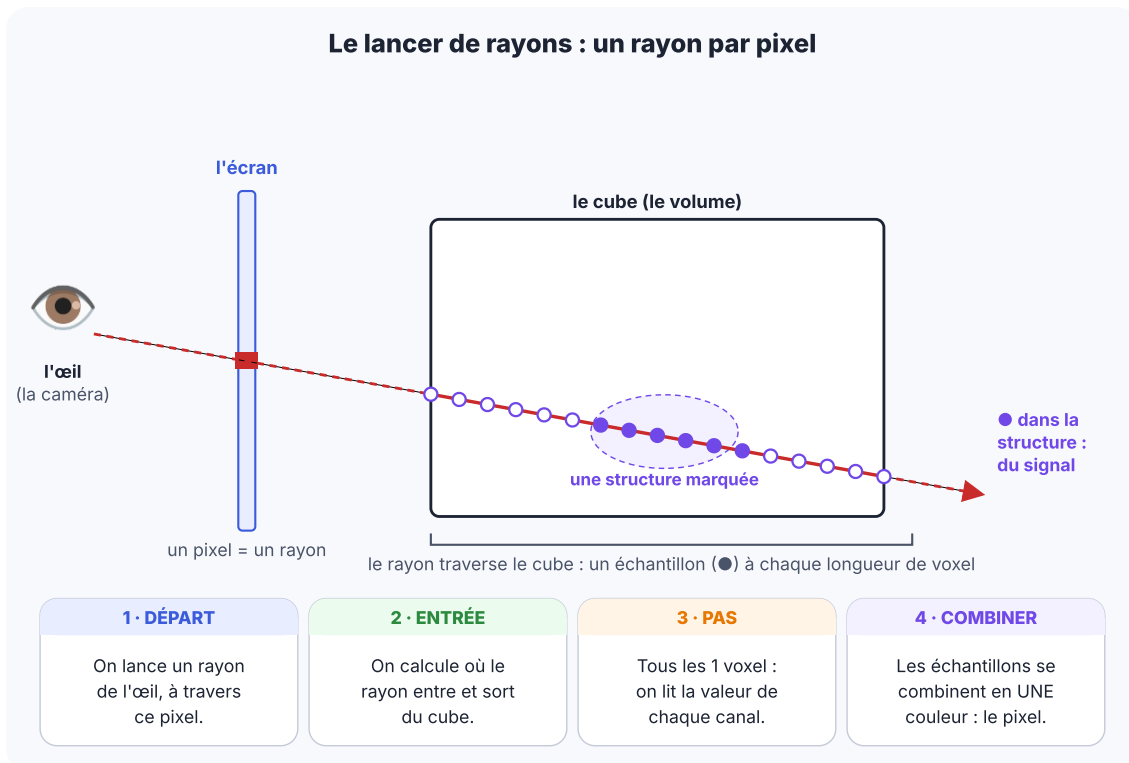

▲ Un rayon par pixel : il entre dans le volume, prend un échantillon par voxel traversé, et combine ces valeurs.

L'image n'est pas une photo : elle est **recalculée** à chaque mouvement par la carte graphique, des milliers de pixels en parallèle (Three.js + WebGL2). Pendant que vous faites tourner, la définition baisse un peu pour rester fluide ; à l'arrêt, elle revient au maximum (un échantillon par voxel). Les briques vides sont sautées. → ch. 9

9.3 Les trois modes de rendu

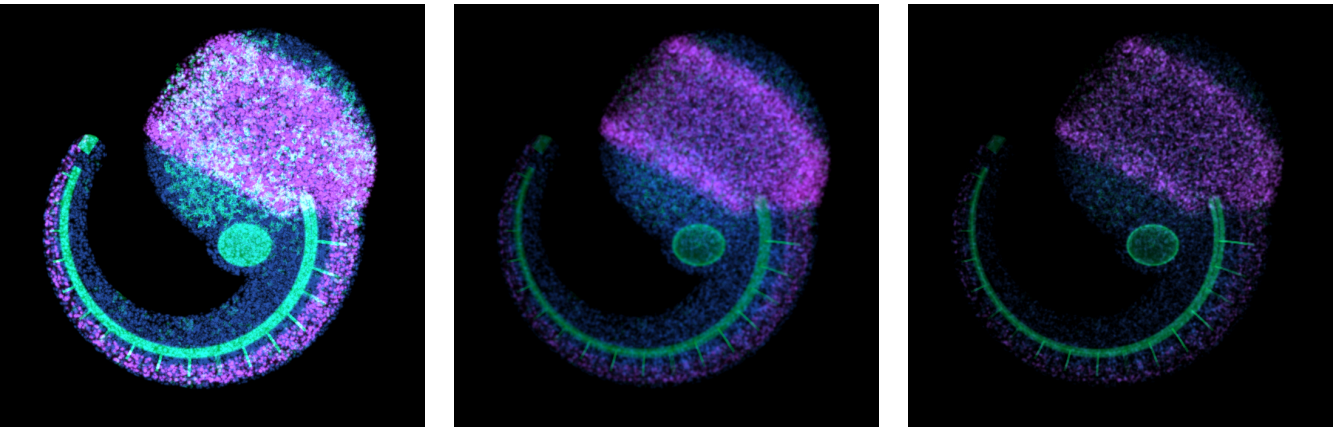


▲ Fluorescence (par défaut). ▲ Fluorescence naturelle. ▲ Structure (DVR).

MODE	CE QUE VOUS VOYEZ	BON POUR...
Fluorescence	le maximum de chaque canal le long du rayon, couleurs additionnées, sans profondeur	voir tout le signal, comme une MIP
Fluorescence naturelle	chaque fluorophore brille ; ce qui est dense cache ce qui est derrière	percevoir la forme et la profondeur
Structure (DVR)	une opacité accumulée de l'avant vers l'arrière	des surfaces et des volumes pleins


10. Régler l’affichage d’un canal

🕒 EN 30 SECONDES


- Chaque canal a un **min**, un **max**, un **gamma**, une **opacité** et une **couleur** ; les canaux sont **additionnés**.
- L'**histogramme** montre la répartition des valeurs 0–255 du niveau le plus grossier, en 64 barres.
- Ces réglages ne changent **que l’affichage**, jamais les données.

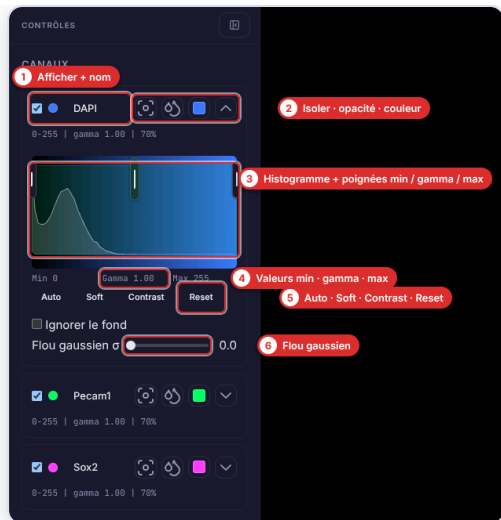

▲ La carte d'un canal dépliée.

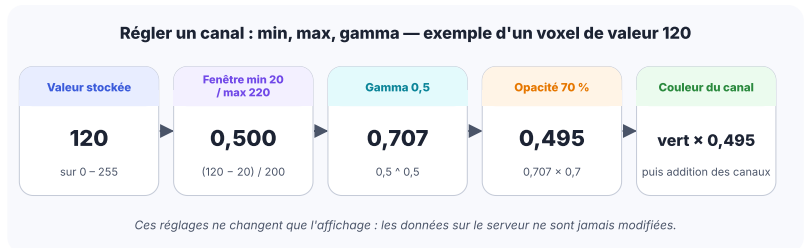

▲ Le calcul d'un voxel, du stockage à l'écran.

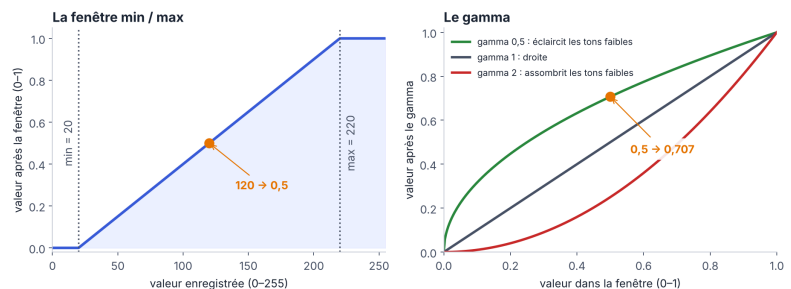


▲ À gauche, la fenêtre min 20 / max 220 ; à droite, l'effet du gamma 0,5 / 1 / 2.

- **Min / Max** : tout ce qui est sous *min* devient noir, au-dessus de *max* pleine couleur.
- **Poignée du milieu** : le niveau affiché à 50 % ; elle règle le gamma ($\text{gamma} = \ln 0,5 \div \ln m$).
- **Auto** coupe les 0,5 % les plus sombres et les plus clairs ; **Doux**, **Contraste** et **Réinit.** sont des préréglages.
- **Opacité** : 70 %, 42 % ou 100 % ; **Exposition** : de 0,2× à 5× pour tous les canaux ; **Solo** isole un canal.
- **Flou gaussien** : lissage plan par plan (σ en voxels), disponible aux qualités qui tiennent en une seule texture.
- Un **filtre de simulation des daltonismes** vérifie qu'une figure reste lisible.

⚠ ATTENTION

Un réglage caché. Avant vos réglages, le viewer met aussi à 0 les valeurs les plus faibles de chaque canal (un « plancher » entre 6 et 48, estimé sur l'histogramme), puis étire le reste. C'est pourquoi le bruit résiduel disparaît à l'écran. → ch. 11

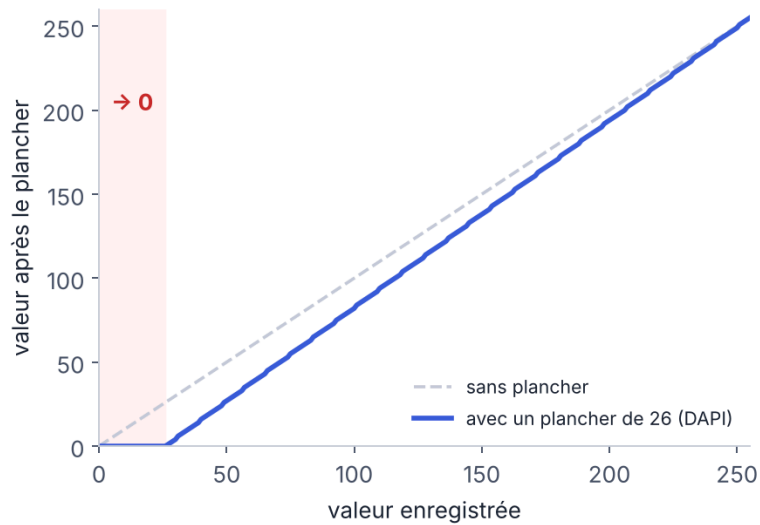


▲ L'effet du plancher d'affichage : estimé à 26 pour le canal DAPI du jeu de démonstration.


11. Mesurer et explorer l'intérieur

⌚ EN 30 SECONDES

- La **mesure** se fait en μm , avec la vraie taille des voxels, sur la première structure visible sous le clic.
- **Coupe oblique** et **navigateur Z-stack** montrent l'intérieur, avec une barre d'échelle exacte.
- La barre d'échelle de la **vue 3D** n'est exacte qu'à la profondeur du centre de l'échantillon.

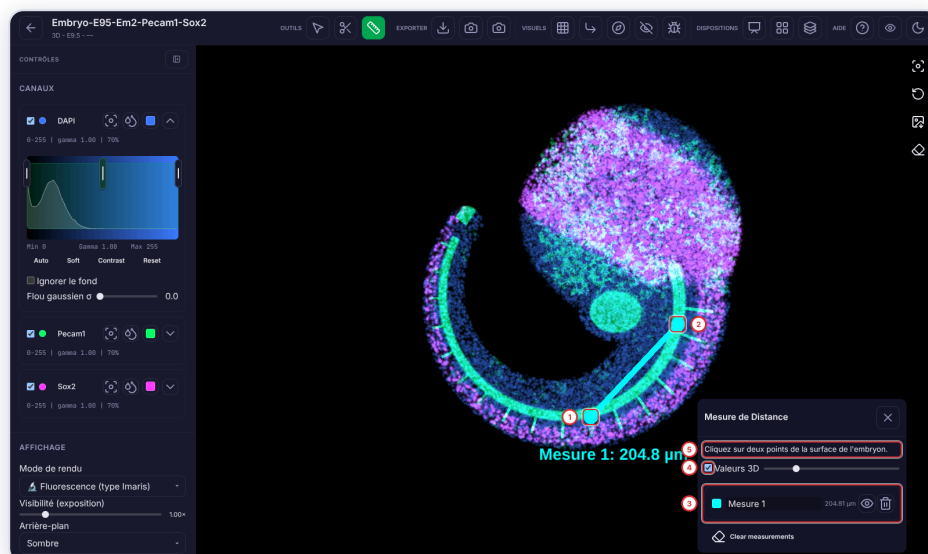

▲ Deux points et la distance mesurée : 204,8 μm (jeu de démonstration).

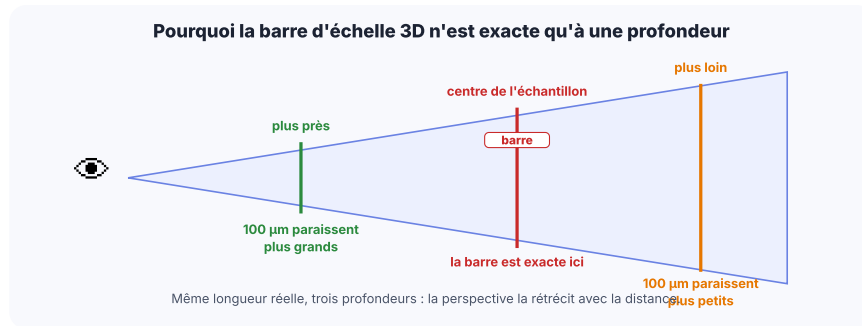


▲ Même longueur, trois profondeurs : la barre de la vue 3D vaut pour le plan du centre de l'échantillon.

12. Faire des figures et exporter


🕒 EN 30 SECONDES

- Le **Studio** compose une figure annotée à **pleine résolution** (flèches, textes, distances, barre d'échelle).
- La vue 3D s'exporte à **n'importe quelle taille**, avec fond transparent si besoin.
- **Comparer** met jusqu'à 4 jeux côte à côte, synchronisés.

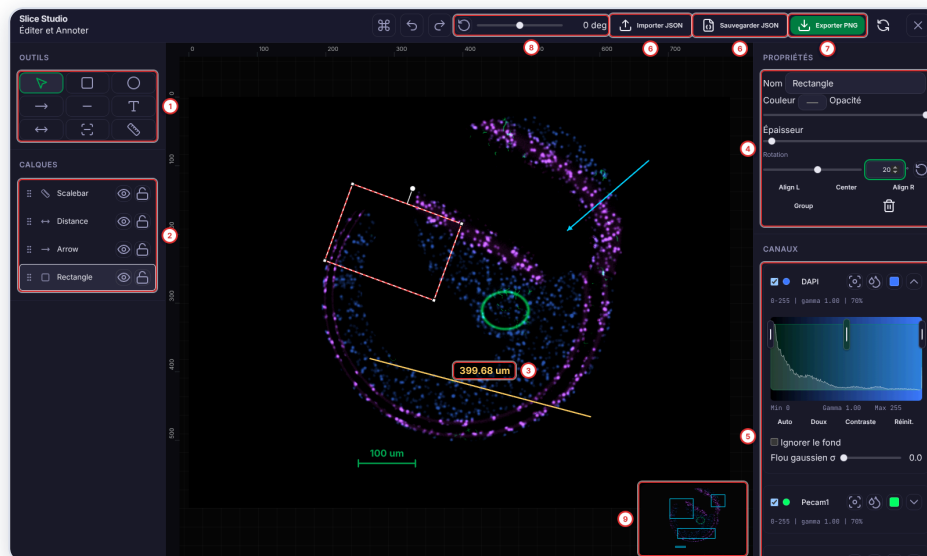

▲ Le Studio : rectangle tourné, flèche, distance, barre d'échelle et texte, sur une coupe du jeu de démonstration.

- Ouvrir une coupe dans le Studio la recharge **au niveau natif** (plans XY ou plages d'octets), avec une progression.
- Les **couleurs des canaux** se règlent dans le Studio sans toucher aux annotations.
- Export **PNG** (la figure) ou **JSON** (pour la reprendre plus tard) ; au-delà de 5 Mo, l'export est refusé avec un message.

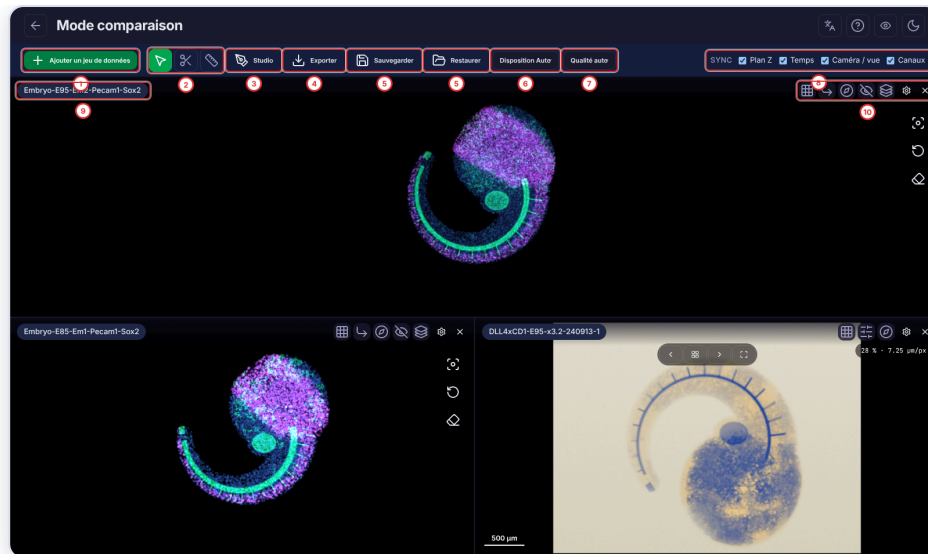

▲ Comparer : deux volumes et une photographie, outils communs et synchronisation (caméra, temps, coupes, canaux).

POUR...	UTILISEZ
une image de la vue 3D, grande et nette	Exporter la vue (rendu par tuiles de 2 048 px, fond transparent possible)
une capture rapide	Capture d'écran
les fichiers d'origine (.ims , TIFF, MIP)	Centre de téléchargement (si le dossier download/ existe)
comparer des embryons ou des canaux	Comparer et Décomposer par canal
partager exactement ce que vous voyez	l'adresse de la page ou l'espace de travail enregistré dans Comparer


13. Timelapses et suivi cellulaire

⌚ EN 30 SECONDES

- La **frise** lit la série de 0,5 à 20 images par seconde ; une barre montre les instants déjà chargés.
- Le **suivi cellulaire** se superpose au volume : cellules, trajectoires, surface de l'embryon.
- Cinq outils d'analyse : trajectoires, surface, inspecteur de cellule, graphiques, distance entre cellules.



▲ Un timelapse suivi (jeu de démonstration, 4 instants) : la couche de suivi et la frise temporelle.

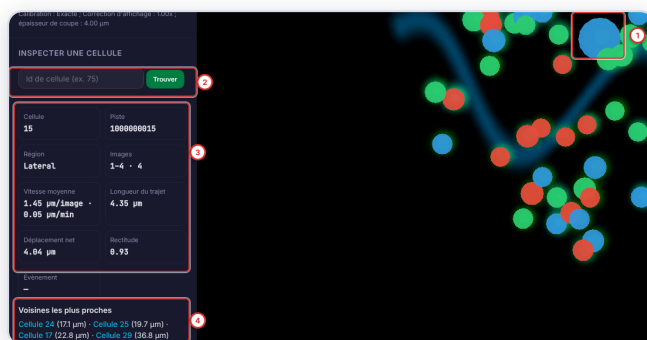

▲ L'inspecteur : métriques, lignée, voisins d'une cellule sélectionnée.




▲ La distance entre deux cellules, suivie dans le temps.

- La lecture **attend** les images qui ne sont pas encore arrivées : elle ne saute jamais un instant en silence.
- Les positions affichées sont les positions **stabilisées** (§ 7) ; les mitoses et fusions sont marquées.
- Les graphiques (population, vitesse, voisins, mitoses) et les tableaux s'exportent. → ch. 12 et 13

14. Les photographies 2D

⌚ EN 30 SECONDES

- Une photographie calibrée par dataset : zoom, barre d'échelle, mesures en μm ou mm .
- **Isoler le marquage** fait ressortir la coloration X-gal (bleue) sur le tissu (jaune).
- Une planche-contact parcourt toutes les photographies de la collection.

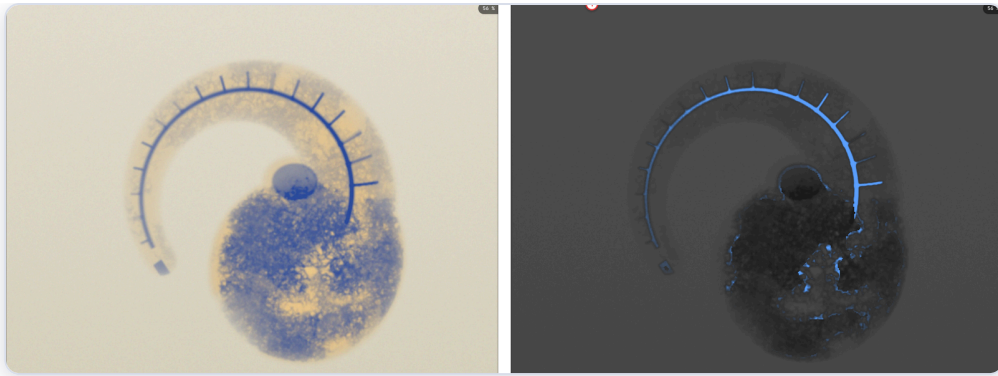

▲ Avant / après « Isoler le marquage » : le bleu ressort, le reste passe en gris (photographie de démonstration).

« Isoler le marquage » : trois étapes pour chaque pixel

1 · Où est le tissu jaune ?

« jaunisme » d'un pixel =
(rouge + vert) / 2 - bleu
 On le moyenne sur un carré
 d'environ 40 px de côté (image
 réduite 4 fois, flou de rayon 5).

fond mat : 2 à 6
tronc coloré large : 6 à 9

2 · Le pixel est-il bleu ?

rapport bleu / (rouge + 1)

Tissu non coloré : $\approx 0,6$

Cœur très coloré : 2 à 4

force v : 0 si rapport $\leq 1,0$
1 si rapport $\geq 1,8$, linéaire entre

et seulement si le « jaunisme »
local dépasse 5 (sinon v = 0)

3 · On repeint

gris = luminosité $\times 0,35 \times (1 - v)$

rouge = gris + 90 $\times v$

vert = gris + 160 $\times v$

bleu = gris + 255 $\times v$

v = 0 : gris sombre

v = 1 : bleu vif (90, 160, 255)

Micro-exemple

Pixel (R, V, B) = (60, 90, 170) : $170 / 61 = 2,8 \rightarrow v = 1$, dans un tissu à « jaunisme » 8 : il devient bleu vif.

Pixel (200, 190, 120) : $120 / 201 = 0,6 \rightarrow v = 0$: il devient gris sombre ($0,35 \times$ sa luminosité).

▲ Le calcul, pixel par pixel : rapport bleu / rouge, limité au voisinage du tissu jaune pour ignorer les poussières du fond.

i À SAVOIR

La photographie est stockée en **WebP avec perte (qualité 90)** par défaut ; l'option `--lossless` garde chaque pixel exact, utile si l'on veut quantifier le rapport bleu / rouge. La calibration vient des métadonnées du TIFF (ImageJ / Leica) ; sans elle, pas de barre d'échelle. → ch. 13

15. Interpréter correctement ce que l'on voit

✚ À RETENIR

- **Les niveaux de gris sont relatifs.** Chaque canal de chaque dataset a sa propre fenêtre (plancher → plafond) : on ne compare pas une intensité entre deux canaux ni entre deux datasets. Dans un timelapse, la fenêtre est **commune à tous les instants** : une baisse d'intensité reste visible, comme dans la réalité.
- **Dans le signal, rien n'est modifié ; hors du signal,** le bruit est lissé (médiane $3 \times 3 \times 3$).
- **Un objet plus fin qu'environ 3 voxels** dans une direction est effacé par le nettoyage, même brillant (§ 4.4).
- **8 bits** suffisent pour la morphologie ; pour **quantifier**, repartez du `.ims` d'origine (dans `download/` si l'option a été activée).
- **Les briques non stockées** sont des zones réellement à 0 après nettoyage, pas des données perdues.
- **Le plancher d'affichage** (6 à 48) masque les valeurs les plus faibles à l'écran : baissez *min* ne les fera pas revenir.
- **Au plus 4 canaux** sont affichés en même temps.
- **Sans calibration** dans le fichier, aucune mesure en μm n'est proposée.
- **La vue 3D est en perspective** : mesurez avec l'outil de mesure ou sur une coupe, pas avec la barre d'échelle 3D.

15.1 Ce que la plateforme ne fait pas

NON DISPONIBLE	POURQUOI / QUE FAIRE
Quantification d'intensité absolue	données en 8 bits fenêtrées : utiliser le <code>.ims</code> d'origine
Segmentation, comptage automatique	faire l'analyse dans Imaris ou Fiji
Déconvolution	à faire avant l'export Imaris
Compensation du photoblanchiment	mesurée par le pipeline, mais pas encore appliquée par le viewer
Modifier les voxels	tout est en lecture seule ; seul l'affichage se règle

→ ch. 20 (annexe « Ce que Lumen3D ne fait pas »)

16. Que se passe-t-il si... ?

SITUATION	CE QUE FAIT LA PLATEFORME	CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE
L'image est floue au début	le niveau grossier arrive d'abord, le détail suit	attendre la fin de la progression
« Natif » affiche un autre niveau	mémoire graphique insuffisante : niveau plus léger + message	choisir 1024, fermer d'autres onglets 3D
La carte graphique « plante »	le viewer recharge la vue à mémoire réduite (3 fois en 2 minutes au plus)	baissier la qualité, recharger la page
Une brique est corrompue	elle est affichée vide et comptée, jamais montrée fausse	prévenir l'administrateur
Le transfert d'import s'arrête	il reprend dès que le réseau revient	reglisser le même dossier si besoin
Le dataset n'est pas dans l'explorateur	il est masqué, ou encore en import	demander à l'administrateur de le publier / l'afficher
Un clic de mesure est refusé	rien de visible sous le curseur	cliquer sur une structure visible
Le flou gaussien est grisé	la qualité choisie est trop grande pour une seule texture	choisir une qualité plus basse

→ ch. 19 (plus de 60 situations détaillées)

17. Les mots à connaître

Voxel

Le « pixel » d'un volume : un petit pavé, ici $1,2 \times 1,2 \times 3,0 \mu\text{m}$. → ch. 4

Canal

L'image d'un fluorophore (DAPI, Pecam1...). → ch. 4

Plancher / plafond

Les deux valeurs qui définissent la conversion en 8 bits : sous le plancher → 0, au-dessus du plafond → 255. → ch. 5

Masque

Les voxels reconnus comme signal ; seuls ceux hors du masque sont lissés. → ch. 5

Pyramide (niveaux)

Les versions de plus en plus petites du volume ; le niveau 0 est la pleine résolution. → ch. 6

Brique

Un cube de 64^3 voxels, l'unité de découpage et de téléchargement. → ch. 7

WebP sans perte

Le format d'image qui stocke les briques en gardant chaque valeur exacte. → ch. 6

MIP

Projection d'intensité maximale : on garde la valeur la plus forte le long d'un axe. → ch. 7 et 9

Lancer de rayons

La méthode de dessin : un rayon par pixel traverse le volume et combine les valeurs rencontrées. → ch. 9

Gamma

L'exposant qui éclaircit (< 1) ou assombrit (> 1) les tons moyens. → ch. 11

Histogramme

Le graphique qui compte combien de voxels ont chaque valeur. → ch. 11

Stabilisation

Le déplacement rigide qui compense la dérive de l'embryon dans un timelapse. → ch. 8 et 13

Studio

L'atelier de figures annotées à pleine résolution. → ch. 12 et 13

Format de données

Le numéro de version de l'organisation des fichiers d'un dataset (1 à 4). → ch. 17

POUR ALLER PLUS LOIN

Documentation complète (« Lumen3D, de A à Z ») : 21 chapitres, plus de 350 pages, chaque étape illustrée. **Guide de l'administrateur** : tous les écrans du panneau, pas à pas. Les deux sont publiés dans l'onglet *Documentation* du panneau d'administration.